




# INSTRUCTIONS POUR LES Seringues autobloquantes

## INDICATIONS D'UTILISATION

La seringue à désactivation automatique est destinée à être utilisée pour l'aspiration et l'injection de vaccins à des fins médicales. De plus, après l'injection au corps, le piston peut être automatiquement verrouillé par le mécanisme pour empêcher la réutilisation de cette seringue.


## STRUCTURE PRINCIPALE ET PERFORMANCES

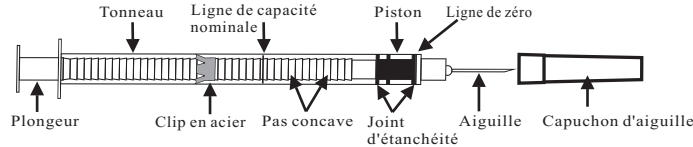

- Le baril est transparent, lisse et permet d'observer clairement le liquide.
- Dans le même plan, le plongeur peut être vu comme une étape concave de même distance, ce qui définit une zone de destruction.
- Le clip en acier, entre le cylindre et le piston, est destructif après utilisation.
- La seringue elle-même est reliée à une aiguille hypodermique fixe.
- Spécification : TKADS03 : 0, 1ml, 0,2ml, 0,25ml, 0,3ml, 0,4ml, 0,5ml, 1ml. Taille de l'aiguille : 23G à 31G

## UTILISATION

- 1) Ouvrez l'emballage stérile.
- 2) Retirez le capuchon de protection sans toucher l'aiguille.
- 3) Ne pas tirer le piston en arrière avant d'utiliser la seringue.
- 4) Insérer l'aiguille dans le bouchon en caoutchouc propre du flacon de vaccin et aspirer une dose.
- 5) Expulser l'air ou le vaccin, en ajustant le piston à la dose de vaccin indiquée.
- 6) Injecter le vaccin.
- 7) Retirer la seringue.
- 8) Placer la seringue usagée dans la boîte de sécurité (ne pas trop remplir la boîte de sécurité).

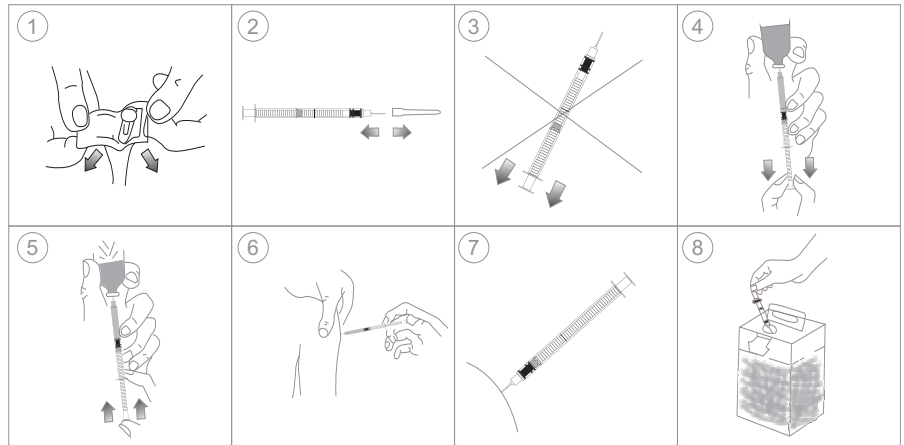

## PRÉCAUTIONS

- L'aiguille est dirigée vers le haut et expulse tout l'air contenu dans le cylindre de la seringue, au cas où de l'air serait injecté dans le corps humain.
- Fonctionnement anormal, ne pas tirer le piston. Si vous aspirez du liquide, ne le repoussez pas, car le produit serait détruit.
- La seringue doit être stérile et apyrogène avant l'ouverture de l'emballage.
- Sa période de validité est de cinq ans. Ne pas utiliser si la date de validité est dépassée.

## AVERTISSEMENTS

- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé, si le capuchon de protection est détaché ou si des corps étrangers sont présents.
- Il doit être utilisé par une personne spécialement formée, et la peau doit être correctement stérilisée.
- Les produits ne peuvent pas être réutilisés, l'utilisation répétée peut provoquer des infections croisées, voire des maladies graves, comme l'hépatite, le VIH et d'autres maladies infectieuses.

## STOCKAGE

-Le produit doit être conservé dans des conditions où l'humidité relative est inférieure à 80 %, il doit également être exempt de gaz corrosifs, frais, sec avec une bonne ventilation et propre.

## SYMBOLES

UDI Identifiant unique du dispositif	LOT Code de lot	REF Numéro de catalogue	Attention	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
Date de fabrication	Fabricant	Prévention de la réutilisation	Ne pas réutiliser	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
Dispositif médical	Date limite d'utilisation	Ne pas restériliser	Fragile, à manipuler avec précaution	
Conserver à l'abri du soleil	Conserver au sec	Non pyrogène	Par ici, en haut	
Système de barrière stérile unique	Système de barrière stérile simple avec emballage protecteur extérieur	REV. :A/0 DATE : 08-03-2022		