




INSTRUCTIONS POUR LES Seringues autobloquantes

INDICATIONS D'UTILISATION

Les seringues automatiques invalidantes sont utilisées pour l'aspiration et l'injection de vaccins à des fins médicales. De plus, après injection dans le corps, le piston peut être verrouillé automatiquement par le mécanisme pour empêcher la réutilisation de cette seringue.

Groupe cible des patients: toutes les populations.

STRUCTURE PRINCIPALE ET PERFORMANCES

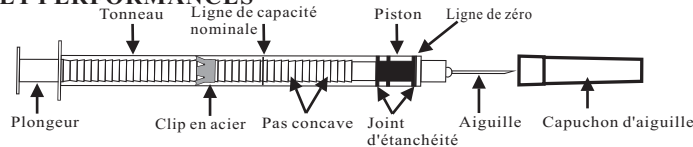


- Le baril est transparent, lisse et permet d'observer clairement le liquide.
- Dans le même plan, le plongeur peut être vu comme une étape concave de même distance, ce qui définit une zone de destruction.
- Le clip en acier, entre le cylindre et le piston, est destructif après utilisation.
- La seringue elle-même est reliée à une aiguille hypodermique fixe.
- Avantages cliniques attendus: livraison intelligente et précise de médicaments à la demande; Réduit les effets secondaires systémiques tels que rougeur, douleur, gonflement; Réduire le risque de blessures par piqûre d'aiguille.
- Caractéristiques de performance: injection de dose précise pour éviter l'utilisation secondaire et la contamination croisée.

Spécification : TKADS03 : 0,1ml, 0,2ml, 0,25ml, 0,3ml, 0,4ml, 0,5ml, 1ml. Taille de l'aiguille : 23G à 31G

UTILISATION

- 1) Ouvrez l'emballage stérile.
- 2) Retirez le capuchon de protection sans toucher l'aiguille.
- 3) Ne pas tirer le piston en arrière avant d'utiliser la seringue.
- 4) Insérer l'aiguille dans le bouchon en caoutchouc propre du flacon de vaccin et aspirer une dose.
- 5) Expulser l'air ou le vaccin, en ajustant le piston à la dose de vaccin indiquée.
- 6) Injecter le vaccin.
- 7) Retirer la seringue.
- 8) Placer la seringue usagée dans la boîte de sécurité (ne pas trop remplir la boîte de sécurité).

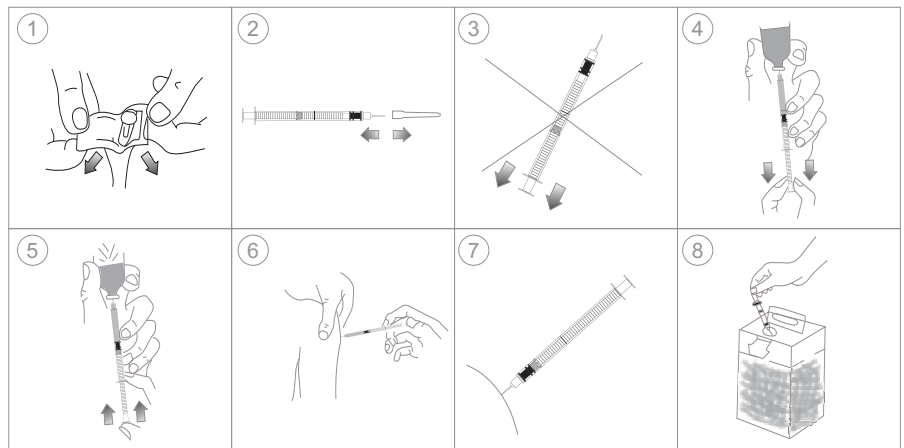

PRÉCAUTIONS

- L'aiguille est dirigée vers le haut et expulse tout l'air contenu dans le cylindre de la seringue, au cas où de l'air serait injecté dans le corps humain.
- Fonctionnement anormal, ne pas tirer le piston. Si vous aspirez du liquide, ne le repoussez pas, car le produit serait détruit.
- La seringue doit être stérile et apyrogène avant l'ouverture de l'emballage.
- Sa période de validité est de cinq ans. Ne pas utiliser si la date de validité est dépassée.

AVERTISSEMENTS

- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé, si le capuchon de protection est détaché ou si des corps étrangers sont présents.
- Il doit être utilisé par une personne spécialement formée, et la peau doit être correctement stérilisée.
- Les produits ne peuvent pas être réutilisés, l'utilisation répétée peut provoquer des infections croisées, voire des maladies graves, comme l'hépatite, le VIH et d'autres maladies infectieuses.

STOCKAGE

Identifiant unique du dispositif	Code de lot	Numéro de catalogue	Attention	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène	
Date de fabrication	Fabricant	Prévention de la réutilisation	Ne pas réutiliser	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé	
Dispositif médical	Date limite d'utilisation	Ne pas restériliser	Fragile, à manipuler avec précaution	Limites de température	
Conserver à l'abri du soleil	Conserver au sec	Non pyrogène	Par ici, en haut	Limitation de l'humidité	
Système de barrière stérile unique		Système de barrière stérile simple avec emballage protecteur extérieur		REV.: B/0 DATE: 30-06-2023	